

# NÁVOD NA POUŽITIE

**CHODÍTKO**

**AT51002**



## ÚČEL

Skladacie chodítko je určené pre ľudí s problémami so vzpriameným stáťím, s poruchami pohybového aparátu alebo pre ľudí, ktorí majú pri chôdzi problémy s rovnováhou.

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Chodítko poskytuje používateľovi oporu, čím znižuje riziko pádu. Výrobok je vhodný na učenie sa chodiť alebo po úraze.

- vyrobené zo zosilneného hliníka
- vybavené súpravou dvoch koliesok a nožičiek
- 3 v 1; môže sa používať ako chodítko so 4 pevnými nohami, krokovacie chodítko alebo chodítko s dvoma kolieskami na uľahčenie mobility
- jednoduché skladanie a preprava, skladanie jedným tlačidlom
- 8 stupňov nastavenia výšky
- ergonomické rukoväte
- jednoduché skladovanie vďaka skladaciemu rámu.

## KONTRAINDIKÁCIE

Fyzické alebo mentálne obmedzenia (napr. poruchy zraku), ktoré bránia bezpečnej manipulácii s výrobkom.

## UPOZORNENIA:

1. Pred použitím chodítka si prečítajte tento návod na použitie a uschovajte si ho pre budúce použitie.
2. Používanie chodítka na neistých povrchoch, t. j. na mokrom, zľadovatenom, masťnom alebo veľmi prašnom povrchu, nie je povolené z dôvodu rizika pádu.
3. Pred každým použitím vykonajte vizuálnu kontrolu všetkých konštrukčných prvkov výrobku vrátane - dôkladne skontrolujte stabilitu a stav nosného rámu.
4. Chodítko je určené len pre jedného používateľa, je zakázané na ňom stáť.
5. Neprekračujte maximálnu výšku.
6. Existuje možnosť zaseknutia prstov v sklopnej časti rámu chodítka.
7. Nepoužívajte chodítko, ak je viditeľne alebo hmatateľne poškodené (napr. zlomený rám), pretože to môže spôsobiť nehodu.
8. Nenakláňajte sa mimo obvodu chodítka. To môže spôsobiť pád používateľa.
9. Nekývajte chodítko. To môže spôsobiť pád používateľa.
10. Nepoužívajte, ak hmotnosť používateľa presahuje 115 kg.
11. Zabráňte kontaktu s otvoreným ohňom. Výrobok sa môže vznietiť.
12. Po inštalácii sa uistite, či je upevňovací kolík nožičky alebo kolieska v rovnej výške. V opačnom prípade výrobok nemusí byť stabilný a otvor sa môže deformovať.

## UPOZORNENIE:

V prípade, ak dôjde k „závažnej udalosti“ súvisiacej s produktom, ktorá priamo alebo nepriamo viedla, mohla alebo môže viesť k niektorej z nasledujúcich udalostí:

- a) smrť pacienta, užívateľa alebo inej osoby,
- b) dočasné alebo trvalé zhoršenie zdravotného stavu pacienta, užívateľa alebo inej osoby,
- c) vážne ohrozenie verejného zdravia,

je potrebné takúto udalosť nahlásiť výrobcovi a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom má užívateľ alebo pacient bydlisko. V prípade Slovenska je príslušným orgánom Štátny ústav pre kontrolu liečiv.

## UPOZORNENIE:

V prípade výskytu bolesti, alergických reakcií alebo iných príznakov súvisiacich s používaním výrobku, obráťte sa na svojho lekára.

## TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE:

Výška: 75-93 cm, 8 stupňov nastaviteľných po 2 cm

Šírka medzi rukoväťami: 46 cm

Hmotnosť s kolieskami: 2 650 g, s nohami: 2,35 kg

Hĺbka: 40 cm

Hrúbka v zloženom stave: 12 cm

Priemer kolesa: 12,5 cm

Šírka: (vpredu) 46 cm, (vzadu) 51 cm

Maximálna hmotnosť používateľa: 115 kg




TENTO SYMBOL OZNAČUJE MAXIMÁLNU HMOTNOŠŤ UŽÍVATEĽA

## ÚDRŽBA PRODUKTU

Výrobok by sa mal pravidelne čistiť vodou a čistiacimi prostriedkami. Výrobok môže byť ošetrovaný dezinfekčnými prostriedkami. Ak sa výrobok nepoužíva, mal by sa skladovať v suchej miestnosti. Vyhnite sa dlhodobému vystaveniu priamemu slnečnému žiareniu..

**UPOZORNENIE:** Výrobca nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nedbalou údržbou, nedostatočným servisom alebo v dôsledku nedodržania pokynov uvedených v tomto návode.

## PRÍPRAVA NA POUŽITIE:

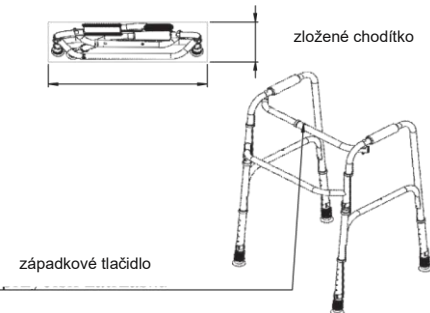

Ak chcete chodítko zložiť, stlačte tlačidlo západky a potiahnite boky chodítka dovnútra, potom chodítko zložte.

## CHÔDZA S AKTIVOVANOU FUNKCIOU KROKOVANIA

Funkcia chôdze je zapnutá, keď sú blokovacie kolíky funkcie chôdze v prednej výstuži rámu. Postavte sa k chodítku a držte ho oboma rukami za rukoväte. Pohyb v tomto type zariadenia spočíva v striedavom zdvíhaní bokov chodítka smerom nahor a ich posúvaní dopredu a pridávaní dolných končatín.


## POHYB V CHODÍTKU S AKTIVOVANOU PEVNOU FUNKCIOU

Ak chcete získať pevnú funkciu, odstráňte dva bezpečnostné kolíky umiestnené na vodorovnom hornom výstužnom prvku rámu a umiestnite ich do otvorov umiestnených v rovnakej výške na zvislom prvku rámu. Pohyb s pevným chodítkom sa vykonáva tak, že ho posuniete dopredu a potom pridáte končatiny. Ak sa má obnoviť funkcia chôdze alebo ak sa má chodítko zložiť, kolíky sa musia znova zasunúť do horizontálnej výstuhy rámu.

## POHYB S CHODÍTKOM S KOLIESKAMI

Ak chcete získať chodítko s kolieskami, najprv chodítko zablokujte (vypnite funkciu chôdze), odstráňte predné nohy a na ich miesto nasadte kolieska. Nezabudnite skontrolovať výšku všetkých nôh (musia byť rovnako dlhé).

Pred použitím výrobku je potrebné nastaviť výšku. Na tento účel zatlačte sponu a zaistite ju na požadovanej úrovni - rovnako pre všetky štyri nohy. V opačnom prípade výrobok nemusí byť stabilný a otvor sa môže deformovať.

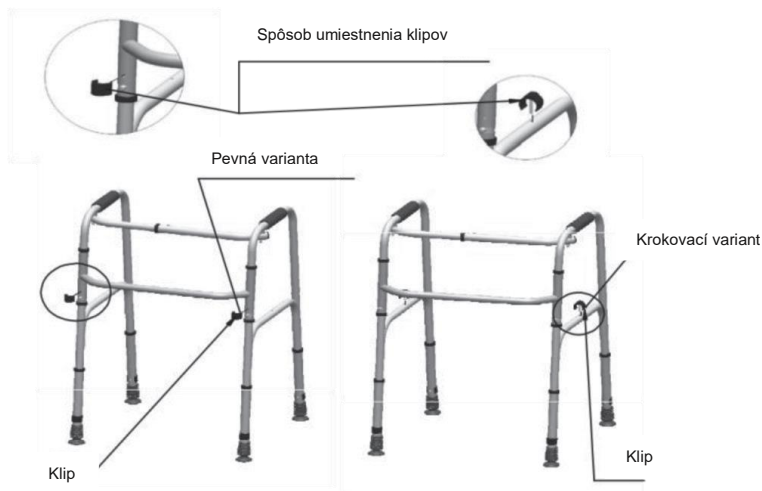

## CIEĽOVÁ SKUPINA PACIENTOV

Zdravotnícky pracovník uvedie použitie pomôcky dospelým a deťom na vlastnú zodpovednosť, pričom zohľadní dostupné varianty/veľkosti/potrebné funkcie a indikácie a zohľadní informácie poskytnuté výrobcom.

## SKLADOVANIE

Výrobok by sa mal skladovať na suchom a chladnom mieste, mimo dosahu vlhkosti a priameho slnečného žiarenia.

## SPÔSOB ZNEŠKODNENIA PRODUKTU PO UKONČENÍ POUŽÍVANIA

Po ukončení používania medicínskeho výrobku, môže byť zlikvidovaný ako bežný domový odpad s výnimkou elektrických výrobkov – vtedy postupovať spôsobom zodpovedajúcim likvidácii elektrických a elektronických zariadení.

## ZÁRUČNÝ LIST

Model:

Sériové číslo:

Dátum predaja:

Pečiatka predajcu a čitateľný podpis predávajúceho:

- 1) Firma Anmed Plus, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec dáva týmto záruku na výrobok 2 roky odo dňa vydania tovaru kupujúcemu.
- 2) V záručnej dobe sa Anmed Plus zaväzuje vykonať nevyhnutné opravy za účelom možnosti opätovného používania tovaru v termíne do 30 dní od dňa obdržania reklamácie.
- 3) Anmed Plus si vyhradzuje právo výmeny tovaru v prípade, že náklady na jeho opravu uzná za nerentabilné. Oprava alebo výmena poškodeného výrobku nepredlžuje záručnú dobu.
- 4) V prípade zistenia nesprávneho fungovania tovaru je ho potrebné bezodkladne odoslať na adresu firmy Anmed Plus (uvedenej v bode 1) alebo kontaktovať predajcu.
- 5) Pred použitím tovaru je potrebné oboznámiť sa s návodom na použitie a riadiť sa inštrukciami v ňom uvedenými. Používanie tovaru v rozpore s jeho určením má za následok stratu záruky.
- 6) Záruka nepokrýva poškodenia vzniknuté následkom prerezania výrobku ostrým predmetom, poškodenia vzniknuté v dôsledku pôsobenia vonkajších mechanických síl, znečistenia výrobku masťnými substanciami alebo benzínom.
- 7) Produkt odoslaný do servisu v rámci reklamácie nesmie predstavovať epidemiologické ohrozenie.
- 8) TENTO ZÁRUČNÝ LIST JE PLATNÝ VÝLUČNE SPOLU S DOKLADOM O KÚPE (ÚČTOVNÝM DOKLADOM, BLOČKOM ALEBO FAKTÚROU). V PRÍPADE REKLAMÁCIE PROSÍME O PRÍLOŽENIE DOKLADU O KÚPE.
- 9) Reklamácie predložené bez dokladu o kúpe nebudú akceptované.



ANTAR Sp. J.  
ul. Zawisłańska 43  
03-068 Warszawa, Poľsko

### Distribútor:

ANMED PLUS, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec,  
E-mail: anmedplus@anmedplus.sk; www.anmedplus.sk  
Tel./fax: 041/542 49 16

Dátum vydania návodu: 19.01.2023

v1-1 19.01.2023

